


Medizinischer Mund-Nasen-Schutz



Beschreibung	<p>Der Mund-Nasen-Schutz für den medizinischen Bedarf ist aus drei hautfreundlichen Materialschichten gefertigt und schützt vor Tröpfchen mit potentiell gefährdenden Partikeln und Bakterien. Er passt sich dank der Nasenklammer flexibel an die Gesichtsform des Trägers an und ist somit auch für Brillenträger bestens geeignet. Trotz der mehrschichtigen Verarbeitung weist der Mund-Nasen-Schutz eine hohe Luftdurchlässigkeit auf.</p> <p>Hergestellt in der EU.</p> <p>Für den Einsatz im medizinischen Bereich zertifiziert.</p>
Klassifizierung	Typ II
Verwendung	Typ II eignet sich für den Einsatz im medizinischen und chirurgischen Bereich. Er bietet einen hohen antibakteriellen und antiviralen Schutz, sofern die grundlegenden Hygienevorschriften eingehalten werden und der Mund-Nasen-Schutz regelmäßig gewechselt wird.
Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Äußere Schicht: Polypropylen-Spinnvliesstoff Hat eine schützende Funktion und verhindert das Eindringen von kleinen Schmutzpartikeln. 2. Mittlere Schicht: Meltblown-Stoff Filtert aerosolgetragene Bakterien und Staub aus der Atemluft, hat eine hohe Wasserdruckbeständigkeit, eine gute Luftdurchlässigkeit und ist widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. Geeignet für den Einsatz im Hoch- und Niedrigtemperaturbereich. 3. Innere Schicht: Polypropylen-Spinnvliesstoff Sorgt für eine gute Belüftung, die freies Atmen ermöglicht. 4. Nasenklammer: verzinkter Draht Sorgt für flexible Anpassung an die Gesichtsform.
Bakterielle Filtereffizienz (BFE)	$\geq 99 \%$
Atmungsaktivität	$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$
Zertifizierung	DIN EN 14683 + AC: 2019-09 CE-zertifiziert

Produkteigenschaften

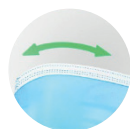


Die Nasenklammer an der Oberseite des Mund-Nasen-Schutzes besteht aus flexiblem Draht. Sie sorgt für einen hohen Tragekomfort und verhindert das Beschlagen der Brille.



Elastische Bänder sorgen auch bei langen Tragezeiten für hohen Komfort. In den Mund-Nasen-Schutz eingenähte Bänder halten ihn im Gesicht und verhindern ein Verrutschen.



Trotz der Dreifach-Schutzschicht zeichnet sich der Mund-Nasen-Schutz durch eine hohe Luftdurchlässigkeit aus, die eine freie Atmung ermöglicht.

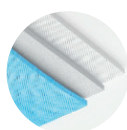

Drei unterschiedliche Propylenschichten filtern Partikel wirksam aus der Luft. Der Mund-Nasen-Schutz ist geruchlos und atmungsaktiv.

Mund-Nasen-Schutz anlegen

1.



Ohriemen auseinanderziehen und Mund-Nasen-Schutz so drehen, dass die Seite mit der eingenähten Metallverstärkung nach oben zeigt.

2.



Mund-Nasen-Schutz am Kinn anlegen und nach oben vollständig über Mund und Nase platzieren.

3.



Ohriemen hinter den Ohren befestigen und den Mund-Nasen-Schutz so ausrichten, dass er bequem sitzt.

4.



Zeige- und Mittelfinger mittig auf der Nase an der Metallverstärkung anlegen, diese zur Nase hin andrücken und beidseitig an der Metallverstärkung entlangfahren, bis der Mund-Nasen-Schutz gut auf dem Nasenrücken sitzt.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung per E-Mail: sampling@inveox.com

Um der derzeit hohen Nachfrage flexibel zu begegnen, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern zusammen. Die gelieferten Produkte können in der Ausführung vom hier aufgeführten Produkt abweichen.

inveox GmbH • Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München, Deutschland
www.inveox.com • Telefon: +49 (0) 89 / 57 84 76 01 • Fax: +49 (0) 89 / 41 41 60 543